

## DEZINFEKČNÍ ROZTOK PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY VE STOMATOLOGII

### DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

#### DEZINFEKČNÍ ROZTOK

Rychlá dezinfekce předem očištěných, neinvazivních zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu a zdravotnického vybavení ve stomatologii, které nelze dezinfikovat ponorem.

K přímému použití

- Složení na bázi etanolu
- Široké spektrum účinnosti při krátkých expozicích
- Po zaschnutí nezanechává žádné stopy
- Příjemně voní
- Bez barviv



# DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

Dezinfekční roztok

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU


- K přímému použití
- Čirý bezbarvý roztok
- Relativní hustota: přibližně 0,9
- pH při 20°C: přibližně 5,5

## NÁVOD K POUŽITÍ


K přímému použití.




Používejte předem očištěné zdravotnické prostředky. Před aplikací zkontrolujte, zda ošetřované oblasti jsou odolné vůči alkoholu. Elektrická zařízení, která se dezinfikují, musí být vypnutá.

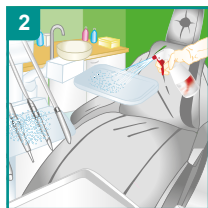

Stříkejte na ošetřovaná místa, dokud nejsou zcela zvlhčena. Aplikujte v dostatečném množství (+/- 40 ml/m<sup>2</sup>). Úplné zvlhčení všech zařízení, která mají být dezinfikována, je důležité.

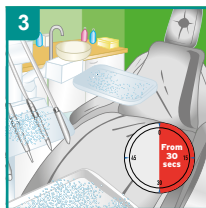

Respektujte uvedenou dobu expozice pro požadovanou účinnost. Oplach je nutný pouze pokud dochází ke kontaktu s pokožkou či se sliznicemi.

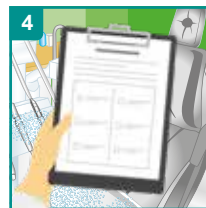

Frekvenci použití se řiďte provozním řádem zařízení. Při dezinfekci zdravotnického prostředku dodržujte návod výrobce.

## MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

PODMÍNKY	DOBA EXPOZICE
Baktericidní* podle EN 13697/EN 13727	30 secs
Účinnost proti kvasinkám* podle EN 13697/EN 13624	30 secs
Fungicidní* podle EN 13697/EN 13624	5 min
Tuberkulocidní* podle EN 14348	30 secs
Mykobaktericidní* podle EN 14348	5 min
Účinnost proti obaleným virům* podle EN 14476/EN 16777	30 secs
Omezené virucidní účinnost* podle EN 14476/EN 16777	5 min
Adenovirus	30 secs
Norovirus (MNV)	5 min

\* Čisté podmínky

## INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Dentasept Spray 60 Pro	3 x 1 l lahev s pistolí	3126920
Dentasept Spray 60 Pro	1 x 5 l kanistr	3126690

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly nebezpečnosti

Signální slovo : **Nebezpečí**  
Standardní věty o nebezpečnosti : H225  
H319

Pokyny pro bezpečné zacházení : **Prevence:**  
P210

P280e

Vysoce hořlavá kapalina a páry.  
Způsobuje vážné podráždění očí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.



D.M.D.  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH  
Odštěpný závod  
Vocťářova 2449/5  
Praha 8, 180 00  
Česká republika

Distributor pro ČR:  
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH  
Rivergate D1/4OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Austria



www.anios.com

## OBLAST POUŽITÍ

Rychlá dezinfekce předem očištěných, neinvazivních zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu a zdravotnického vybavení ve stomatologii, které nelze dezinfikovat ponorem.

## NÁVOD K POUŽITÍ

K přímému použití.

1. Používejte předem očištěné zdravotnické prostředky. Před aplikací zkontrolujte, zda ošetřované oblasti jsou odolné vůči alkoholu. Elektrická zařízení, která se dezinfikují, musí být vypnutá.
2. Stříkejte na ošetřovaná místa, dokud nejsou zcela zvlhčena. Aplikujte v dostatečném množství (+/- 40 ml/m<sup>2</sup>). Úplné zvlhčení všech zařízení, která mají být dezinfikována, je důležité.
3. Respektujte uvedenou dobu expozice pro požadovanou účinnost. Oplach je nutný pouze pokud dochází ke kontaktu s pokožkou či se sliznicemi.
4. Frekvenci použití se řiďte provozním řádem zařízení. Při dezinfekci zdravotnického prostředku dodržujte návod výrobce.

## SLOŽENÍ

Ethanol, N,N-didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)amoniumpropionát, parfém.

## CERTIFIKÁTY

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální účinnost přípravku Dentasept Spray 60 Pro je zahrnuta ve vědecké dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.

## SKLADOVÁNÍ

Skladování: +5°C až +25°C.

## POUŽÍVEJTE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK BEZPEČNĚ

Přečtěte si etiketu a informace o výrobku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.