

Jednoduše bezpečný pocit. Systém hygieny od Dürr Dental.

4 barvy, 4 oblasti - jednoduše, logicky a bezpečně



Spolehněte se na náš systém

Již v roce 1965 vyvinula společnost Dürr Dental první dezinfekční prostředek pro odsávací zařízení – Orotol®. To byl startovní impulz pro další nepřetržitý rozvoj toho, co v hygieně nabízíme. Dnes se zubní lékaři na celém světě spoléhají na systém hygieny Dürr Dental, který jejich ordinaci poskytuje kompletní ochranu.

System hygieny Dürr Dental


Poradenství

- Zvyšování kvalifikace, školení týmů a poradenství na místě
- Odborné znalosti od kvalifikovaných školitelů
- Praktické tipy orientované na řešení, která jsou individuálně přizpůsobená zubním ordinacím
- Podpora při vytváření systému pro řízení kvality




Servis

- Profesionální produktové poradenství, zaměřené na hledání řešení
- Aktuální nabídka informací na internetu

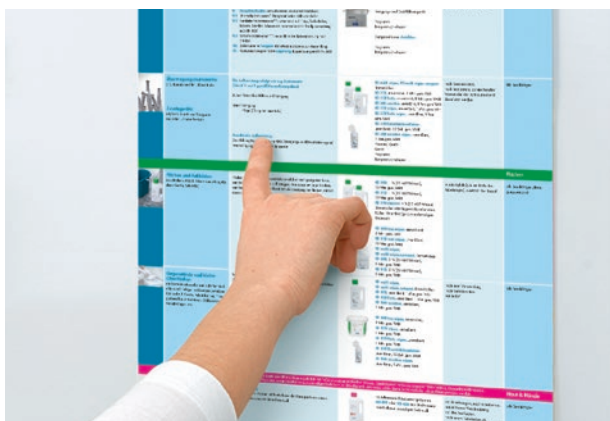

Kvalita

- Vysoké výrobní standardy – vyrobeno v Německu
- Bezpečnost díky definovaným a kontrolovaným pracovním procesům
- Dlouholeté zkušenosti výrobce dezinfekčních a čistících prostředků

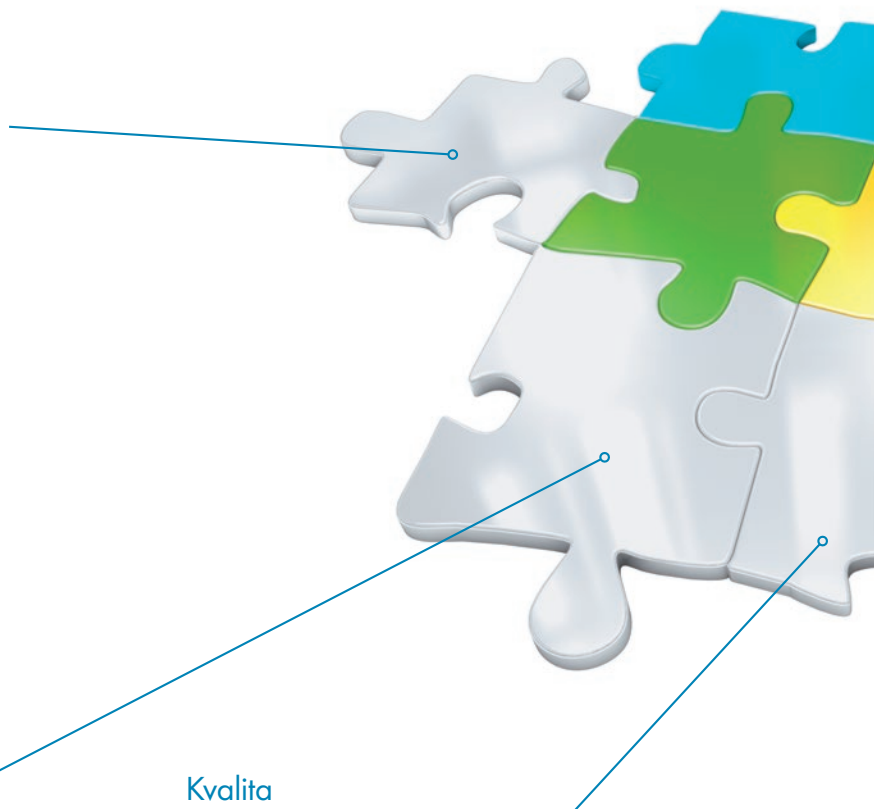

Vedle produktů systému hygieny Dürr Dental vám nabízíme poradenství a služby, které podpoří váš tým v ordinaci při každodenní práci. Proškolíme váš tým přímo ve vaší ordinaci. Náš servis vám bude nápomocný při zodpovězení dotazů týkajících se našich výrobků. A nejvyšší kvalita získaná dlouholetými zkušenostmi je vždy doprovázena neustálými inovacemi zaměřenými na potřeby zubních ordinací.



Orientace na uživatele

- Snadná orientace díky barevnému systému hygieny
- Charakteristická a optimálně skladovatelná 2,5l láhev
- Jednoduchá manipulace díky ergonomickému tvaru láhve
- Odměrka pro optimální dávkování



Hygiena chrání život

- Všechny dezinfekční prostředky systému hygieny Dürr Dental inaktivují koronavirus
- Jedná se o zapouzdřený virus, který je inaktivován již omezeně virucidním účinkem dezinfekčního prostředku



4 barvy - 4 oblasti

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ■ Modrá pro nástroje | Strana 06 |
| ■ Zelená pro plochy | Strana 12 |
| ■ Růžová pro ruce | Strana 16 |
| ■ Žlutá pro speciální oblasti | Strana 18 |

Nejlepší je, když jeden systém poskytuje kompletní řešení

Při ochraně před infekcemi, při dezinfekci a čištění se nesmí nic ponechat náhodě. Z tohoto důvodu jsme četnými zkouškami dokázali, že všechny přípravky splňují požadavky, které jsou v ordinaci při každodenní práci rozhodující.

Bezpečné

- Rozsáhlé spektrum účinků: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně koronaviřů
- Certifikovaný, spolehlivý účinek
- Všechny dezinfekční prostředky jsou uvedeny na seznamu VAH a shodné s normami EN
- Vysoký dezinfekční a čisticí účinek

Naše doporučení pro vaši zubní ordinaci:



HD 410
Dezinfekce rukou

HD 435
Mycí emulze



FD 366 sensitive
Dezinfekce citlivých povrchů

FD 360
Čištění a péče o umělou kůži



FD 366 sensitive wipes
nebo sensitive top wipes



FD 322 nebo FD 333
Rychlá dezinfekce



FD 333 forte premium
wipes
Dezinfekční ubrousky

FD 333 top wipes
Dezinfekční ubrousky



Šetrné


- Promyšlené spojení účinných látek
- Zvlášť jemné a šetrné k pokožce
- Maximálně snášitelné s materiály, doporučené předními výrobci zařízení
- Klinicky vyzkoušené
- Biologická odbouratelnost

Komfortní

- Jednoduchá a efektivní manipulace
- Praktické, jednotné velikosti obalů
- Čištění podle dezinfekčního plánu
- Dávkování pomocí víčka
- Velice hospodárné používání

Rychlé

- Krátké doby působení
- Rychlé zasychání bez zanechávání zbytků
- Praktické použití
- Jednoduché dávkování

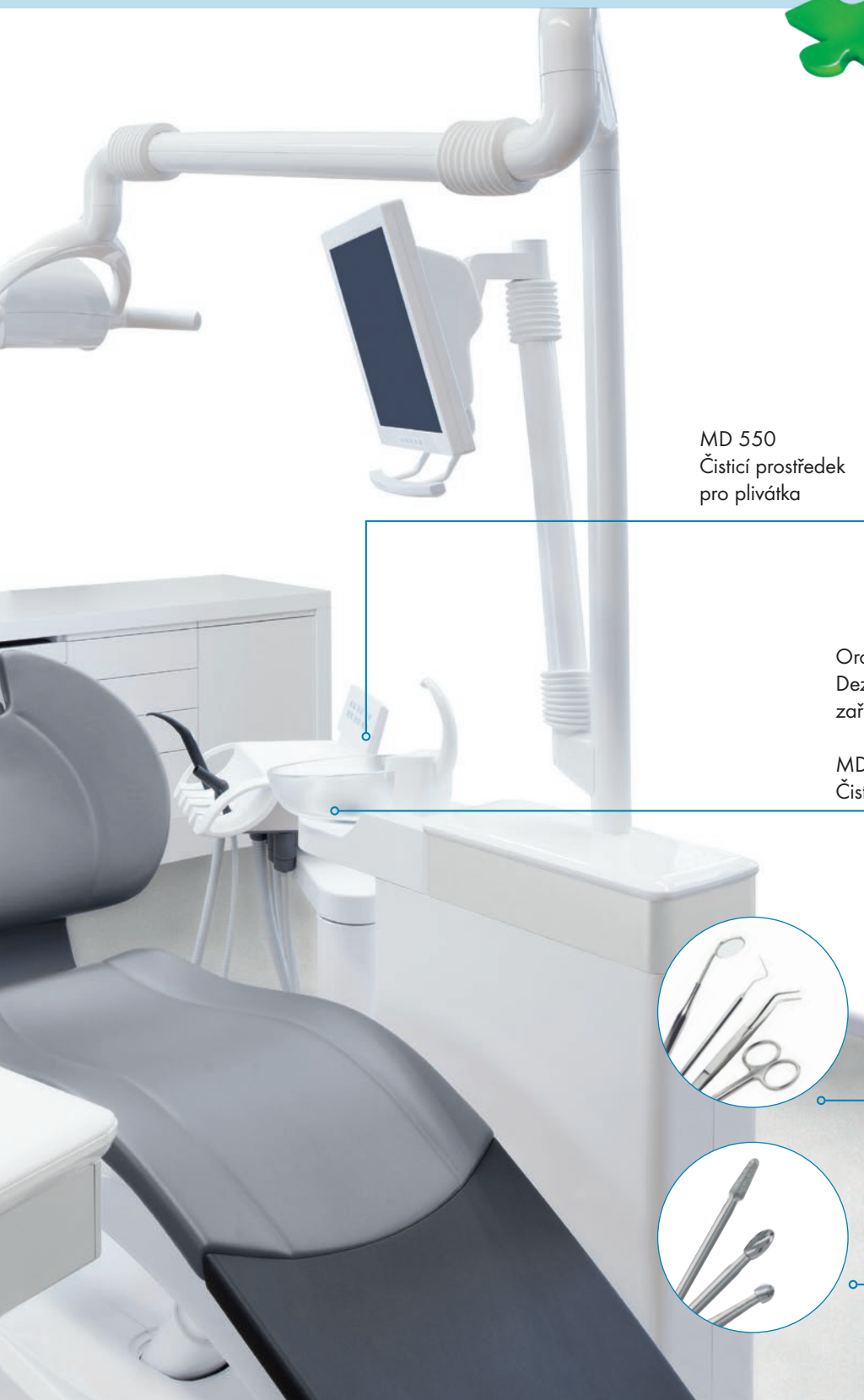

MD 550
Čistící prostředek
pro plivátka



Orotol® plus
Dezinfekce odsávacích
zařízení



MD 555 cleaner
Čistič odsávacích zařízení



ID 212 nebo ID 213
Dezinfekce nástrojů



ID 220
Dezinfekce rotačních
nástrojů



Technologie Dürr Dental: pro maximální účinnost hygienického cyklu

Již 80 let určuje společnost Dürr Dental směr vývoje ve zdravotnické technice – Made in Germany. S touto tradicí a cílem systematicky zdokonalovat náš sortiment hygienické technologie dnes můžeme nabízet celou řadu inovativních technických řešení, s nimiž lze provádět každodenní

Ošetření

Ruční čištění
a dezinfekce

Přístrojová dezinfekce
v čistícím a dezinfekčním
přístroji

Funkční kontrola /
kontrola a ošetření
nástrojů

Balení materiálu
ke sterilizaci přístrojem
Hygopac View
do sáčků Hygofol



činnosti v oblasti hygieny a sterilizace v ordinaci zubního lékaře maximálně efektivně a s nejlepšími výsledky. V kombinaci se systémem hygieny Dürr Dental tak vzniká neporazitelný tým.

Sterilizace parou
ve sterilizátoru
Hygoclave 90

Dokumentace

Uskladnění





Dezinfekce a čištění Nástroje a vrtáčky

■ ID 212 Dezinfekce nástrojů

Koncentrát k čištění a dezinfekci nástrojů se skvělou snášenlivostí s materiály



Působení
7 dní

- Baktericidní, tuberkulocidní v ultrazvukovém přístroji, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
- Vhodná pro běžné, chirurgické a rotační nástroje
- Velmi krátká doba působení
- Skvělá snášenlivost s materiály u nástrojů s pryžovými nebo silikonovými součástmi

Účinné látky: kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: Hygasonic, Hygobox

■ ID 212 forte Dezinfekce nástrojů

Koncentrát k čištění a dezinfekci všeobecných, chirurgických a rotačních nástrojů



Působení
7 dní

- Baktericidní, tuberkulocidní v ultrazvukovém přístroji, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
- Vhodná pro běžné, chirurgické a rotační nástroje
- Vysoká ochrana proti korozi a dlouhá doba účinnosti 7 dní
- Rychlé čištění a dezinfekce

Účinné látky: alkylaminy, kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: Hygasonic, Hygobox

■ ID 213 dezinfekce nástrojů

Koncentrát k čištění a dezinfekci všeobecných, chirurgických a rotačních nástrojů s širokým spektrem účinků



Působení
14 dní

- Baktericidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní v ultrazvukovém přístroji, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené noroviry a polyomaviry SV40)
- Velice hospodárná díky dlouhé době působení 14 dní
- Dobrá snášenlivost s materiály díky inhibitorům koroze

Účinné látky: alkylaminy, kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: Hygasonic, Hygobox

■ ID 215 Enzymatický čistič nástrojů

Koncentrát k ručnímu enzymatickému čištění nástrojů před dezinfekcí



- Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů)
- Chrání personál díky mikrobicidnímu účinku
- Mimořádný čisticí účinek – rozpouští i vysoce odolné nečistoty
- Dobrá snášenlivost s materiály

Účinné látky: kvartérní amonné sloučeniny, sloučeniny guanidinu

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: Hygasonic, Hygobox, ID 220 Box na vrtáčky

■ ID 220 Dezinfekce rotačních nástrojů

Plně virucidní, roztok připravený k použití na čištění a dezinfekci rotačních nástrojů



Plně
virucidní

- Baktericidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené viry jako adenoviry, polyomaviry SV40, noroviry a polioviry)
- Mimořádný čisticí účinek zvláště pro jemné struktury vrtáčků a frézy
- Vynikající ochrana proti korozi a dlouhá doba účinnosti 7 dní
- Velmi krátké doby působení

Účinné látky: alkoholy v alkalickém prostředí

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: Hygasonic, ID 220 Box na vrtáčky

Testováno podle směrnice
DVV/RKI a také EN 14476
a EN 17111



Přístroje a příslušenství

Hygobox

Robustní, odolný přepravní a dezinfekční box s objemem 3 litry



- Ergonomicky tvarované rukojeti k bezpečnému přenášení
- Odkapávací síto, bezpečné proti překlopení
- Nástroje se nezachytávají díky speciálně tvarované šěrbině

Rozměry (VxŠxH): 13 x 32,5 x 21 cm

Barevné varianty: K dostání je antracitově zbarvené víko s modrým nebo žlutým odkapávacím sítem, víko v 5 různých barvách s bílým odkapávacím sítem

Naše doporučení: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535

ID 220 Box na vrtáčky

Dezinfekční dóza pro rotační nástroje



- S víkem a odkapávacím sítem
- Z odolného plastu
- Autoklávatelné do 121 °C

Rozměry: výška 8 cm, Ø: 8,8 cm

Objem: 200 ml

Hygasonic

Vyhřívaný ultrazvukový přístroj pro důkladné vyčištění nástrojů, pomůcek, protéz atd. Navíc mohou být nástroje bezpečně dezinfikovány použitím výrobků ID



- Účinná dezinfekce a čištění šetrné k materiálům
- Rovnoměrné čištění optimalizací zvukového pole
- Zvýšení výkonu díky funkci boost
- Odstranění plynu z roztoku díky funkci degas

Rozměry (VxŠxH): 21,4 x 30 x 17,9 cm

Objem vaničky: 2,75 litr

Příslušenství: víko, sada skel, koš pro nástavce / ponorný koš

Naše doporučení: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, ID 220, MD 530, MD 535

Hygopac

Kontinuální svářečka pro zatavení průhledných sterilizačních obalů



- Optimální přitlačný tlak pro stabilní kvalitu svarového spoje
- Pásový princip pro rychlou a ekonomickou práci
- Plynulá regulace teploty pro optimální pečetici svar

Rozměry (VxŠxH): 16,0 x 43,5 x 13,5 cm

Naše doporučení: Hygofol sáčky, Hygofol role

Hygopac View

Validovatelná kontinuální svářečka pro normované svařování sterilizačních obalů podle normy ČSN EN ISO 11607-2



- Mimořádně kompaktní design odpovídající požadavkům na minimální prostor
- Intuitivní uživatelské rozhraní s dotykovým displejem
- Dokumentace procesu díky ukládání na SD kartu a síťovému připojení

Rozměry (VxŠxH): 17,0 x 37,0 x 14,0 cm

Naše doporučení: Hygofol sáčky, Hygofol role, stůl na lékařské nástroje, Hygofol stanice



Přístroje a příslušenství

Hygoclave 90

Parní sterilizátor třídy B dle EN 13060 s inovativní technologií DuraSteam. Základními vlastnostmi sterilizátoru Hygoclave 90 jsou spolehlivost a úžasné rychlé doby cyklů při současně vysoké energetické účinnosti. Toho je dosaženo díky dokonalé kombinaci a souhře parního kondenzátoru, vakuového čerpadla se třemi písty, trubice přenosu tepla, navařených

ventilových sedel a silného topného výkonu 2400 wattů. Díky mimořádnému komfortu obsluhy a údržby a kompletně nerezové konstrukci pro optimální zachování hodnoty nástrojů ukazuje tento sterilizátor směr dalšího vývoje inovací v oboru.



- Jeden z nejrychlejších sterilizačních cyklů (univerzální program 134 °C / 5,5 min od 12 min)
- Nízká spotřeba vody a energie
- Velká kapacita (až 10 kg při použití sterilních kontejnerů)
- Vysoce spolehlivá sterilizace díky hlubokému a rychle vytvořenému vakuu (velká kondenzační rychlost)
- Schválení podpisem včetně všech relevantních parametrů přímo na přístroji
- Síťové propojení se softwarem Tyscor Pulse a s třetími poskytovateli
- Snadná a rychlá údržba
- Do koše lze umístit až 6 podnosů nebo – při otočení o 90° – 2 normované kazety s tácy a 1 sterilizační kontejner (o výšce 65 mm)

Rozměry (VxŠxH): 47,5 x 54 x 52 cm



Hygotest

Zkušební tělísko Helix s 250 testovacími proužky pro pravidelný, rychlý a jednoduchý Helix test.



- V souladu s EN 867-5 a ISO 11140-1
- PCD (Process Challenge Device) a 250 indikátorů
- Použitelné jako systém kontroly šarží a test Bowie Dick
- Startovací sada s 50 indikátory obsažena v balení dodávky autoklávy

Hygofol

Sterilizační obal Hygofol poskytuje se svou vícevrstvou laminátovou fólií a zvlášť odolným sterilizačním papírem maximální jistotu



- Vysoká odolnost proti průrazu a vynikající mechanická pevnost
- Vysoká pevnost svaru v tahu
- Hygofol jako praktické, prefabrikované sáčky ve 3 velikostech
- Hygofol pro individuální balení v rolích v 5 velikostech

Rozměry:

Hygofol sáček (ŠxD): 7,5 cm, 10 cm nebo 15 cm x vždy 30 cm

Hygofol role (ŠxD): 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm nebo 25 cm x vždy 100 m

*Testováno se sterilními kontejnery z hliníku a dvěma stálými filtry [po jednom ve víku a ve vaně dna]. Hmotnost je včetně sterilních kontejnerů a příslušných nástavců.



■ Hygoprint Plus

Automatická tiskárna štítků pro sterilní obaly umožňuje přímé potištění programově specifických štítků.



- Flexibilní umístění díky ethernetovému připojení
- Velikost štítků podle směrnic – umístění mimo pečeticí svar je možné
- Čárový kód pro naskenování do digitální správy dat
- Údaje na etiketě: přístroj (referenční a sériové číslo), program, datum LOT, uživatel (schváleno kým), datum spotřeby

Rozměry (VxŠxH): 17,5 x 12,5 x 24 cm

Naše doporučení: Hygoprint Plus štítky a tonerové role

■ Hygoprint

Systém k označení sterilních obalů



- Rychlá a jednoduchá dokumentace procesu sterilizace
- Bezchybné označení se všemi relevantními údaji
- Velmi lehký a praktický

Naše doporučení: jednostranné nebo oboustranné lepící nálepky, dokumentační blok se 100 listy, náhradní inkoustový válec

■ Hygodem 90

Hygodem 90 znamená vysokou kvalitu v kompaktní jednotce. Ionový výměník filtruje vodu z vodovodu ve třech náplních a lze ho i na malém prostoru napojit na Hygoclave 90.



- Jednotka na iontovou výměnu
- Komfortní díky 3 náplním iontového výměníku
- Snadná údržba díky odvěšovacímu ventilu
- Snadná instalace díky rychlospojce
- Nízké nároky na prostor
- Příznivá pořizovací cena

Naše doporučení: sada náplní pro Hygodem 90

■ Hygopure 90

Při maximálním vytižení v běžném náročném provozu ordinace potřebuje Hygoclave 90 silného a spolehlivého partnera. Hygopure 90 má velkou kapacitu a umožňuje odebrání většího množství (více litrů) demineralizované vody najednou.



- Reverzní osmotické zařízení včetně vypouštěcího ventilu a zásobníku
- Více filtračních stupňů + vysoce výkonná membrána se servisním ventilem pro kontrolu účinnosti
- Rychlospojka umožňuje snadnou instalaci
- Vysoká kapacita
- Možnost odebrání více litrů demineralizované vody najednou
- Modul eco umožňuje až 70% úsporu vody

Naše doporučení: Sada náplní pro Hygopure 90, membrána DF50 pro Hygopure 90, nerezový vypouštěcí ventil pro Hygopure 90, přístroj pro měření vodivosti HMEC1, ventil pro zastavení vody LD1



Dezinfekce a čištění

Dezinfekce ploch

■ FD 300 Dezinfekce ploch

Plně virucidní koncentrát bez alkoholu k dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené viry jako adenoviry, polyomaviry SV40, noroviry a polioviry)
- Velmi rychlá doba působení
- Hospodárné použití: až 250 litrů 1% roztoku připraveného k použití
- Dobrá snášenlivost s materiály

Účinné látky: alkylaminy, kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 312 dezinfekce ploch*

Koncentrát bez alkoholu k dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, lékařského inventáře a podlah



- Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
- Hospodárné použití: až 250 litrů 1% roztoku připraveného k použití
- Dobrá snášenlivost s materiály
- Zvlášť příjemná vůně

Účinné látky: kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: FD multi wipes, FD multi wipes compact

Dezinfekce s rychlým účinkem

■ FD 322 Dezinfekce s rychlým účinkem

Rychle působící roztok připravený k použití pro dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků a lékařského inventáře



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
- Velmi krátká doba působení
- Zaschnutí beze zbytků
- Dobrá snášenlivost s materiály

Účinné látky: alkoholy

FD 322 k dostání v: 750 ml pro Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

Naše doporučení: rozprašovací hlavice, 600ml postříkací láhev, FD multi wipes, FD multi wipes compact

FD 322 parfuma free k dostání v: 2,5 l, 10 l

Naše doporučení: 600ml postříkací láhev, FD multi wipes, FD multi wipes compact



■ FD 333 Rychlá dezinfekce

Rychle působící roztok připravený k použití pro dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků a lékařského inventáře s rychlým účinkem



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
- Dobrá snášenlivost s materiály
- Svěží citrónová vůně
- Rychlé zaschnutí

Účinné látky: alkoholy, kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 750 ml pro Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

Naše doporučení: rozprašovací hlavice, 600ml postříkovaná láhev, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 333 forte Dezinfekce s rychlým účinkem

Plně virucidní roztok připravený k použití pro dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků a lékařského inventáře s rychlým účinkem



- Baktericidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené viry jako adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry a polioviry)
- Dobrá snášenlivost s materiály
- Svěží citrónová vůně
- Rychlý dezinfekční účinek

Účinné látky: alkoholy, kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 1 l, 2,5 l, 10 l

Naše doporučení: rozprašovací hlavice, 600ml postříkovaná láhev, FD multi wipes, FD multi wipes compact

■ FD 366 sensitive Dezinfekce citlivých povrchů

Roztok se sníženým obsahem alkoholu, připravený k použití pro dezinfekci a čištění zvláště citlivých povrchů zdravotnických prostředků



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené noroviry)
- Rychlý dezinfekční účinek

- U zubních souprav ideální v kombinaci s čisticím prostředkem a péčí na umělou kůži FD 360

- Prověřená snášenlivost s materiály – doporučeno předními výrobci zařízení

Účinné látky: alkoholy, kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 750 ml pro Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

Naše doporučení: rozprašovací hlavice, 600ml postříkovaná láhev, FD multi wipes, FD multi wipes compact

Péče

■ FD 360 Čištění a péče o umělou kůži

Čisticí prostředek pro hluboké čištění pórů a péči o povrch umělé kůže



- Čisticí prostředek šetrný k materiálům, kombinovaný s prostředkem pro údržbu pro trvalé zachování hodnoty

- Intenzivní čisticí účinek – odstraňuje skvrny všeho druhu, mapy a změny zbarvení

- Prověřená snášenlivost s materiály – doporučeno předními výrobci zařízení

- U zubních souprav ideální v kombinaci s prostředkem FD 366 sensitive

Obsažené látky: speciální tenzidy, silikonové sloučeniny a ošetřující přípravek na bázi avokádového oleje

K dostání ve variantách: sada s 500ml postříkovou láhví, 1 utěrkou

FD polishing wipe a 9 speciálními houbičkami

Naše doporučení: FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes, FD lešticí utěrka

Ubrousky pro dezinfekci ploch

Dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu

■ FD 300 top wipes Dezinfekce ploch

Plně virucidní dezinfekční a čisticí ubrousky bez obsahu alkoholu na povrchy neinvazivních zdravotnických prostředků a lékařského inventáře



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, virucidní (všechny zapouzdřené a nezapouzdřené viry)
 - Velmi rychlá doba působení
 - Praktické odebírání z uzavíratelného balení
 - Příjemná struktura pro rychlou manipulaci
- Účinné látky:** alkylaminy, kvartérní amonné sloučeniny
K dostání ve variantách: zásobník s 50 ubrousky
Velikost ubrousku: 17,5 x 25 cm

■ FD 312 wet wipes* Dezinfekce ploch

Dezinfekční a čisticí ubrousky bez obsahu alkoholu na podlahy, inventář ordinace apod.



- Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů)
 - Vysoce vydatná dezinfekce ploch až do 8 m²
 - Ubrousky s voštinovou strukturou odolnou proti protržení
 - Se svěží vůní
- Účinné látky:** kvartérní amonné sloučeniny
K dostání ve variantách: balení s 15 ubrousky
Velikost ubrousku: 22 x 42 cm

Dezinfekční ubrousky s obsahem alkoholu

■ FD 322 premium wipes Dezinfekce s rychlým účinkem, FD 322 top wipes Dezinfekce s rychlým účinkem

Rychle působící dezinfekční a čisticí ubrousky s obsahem alkoholu na menší plochy zdravotnických prostředků



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry, polyomaviry a noroviry)
 - Velmi krátká doba působení
 - Zaschnutí beze zbytků
 - Dobrá snášenlivost s materiály
- Účinné látky:** alkoholy
- FD 322 premium wipes**
K dostání ve variantách: dóza s 80 ubrousky
Velikost ubrousku: 14 x 19 cm
- FD 322 top wipes**
K dostání ve variantách: zásobník s klipem s 50 ubrousky
Velikost ubrousků: 17,5 x 25 cm

■ FD 333 wipes Dezinfekce s rychlým účinkem, FD 333 top wipes Dezinfekce s rychlým účinkem

Dezinfekční a čisticí ubrousky s obsahem alkoholu připravené k použití na menší plochy zdravotnických prostředků



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
 - Rychlý dezinfekční účinek
 - Rychlé zaschnutí
 - Neparfémované
- Účinné látky:** alkoholy, kvartérní amonné sloučeniny
- FD 333 wipes**
K dostání ve variantách: dóza se 110 ubrousky
Velikost ubrousku: 14 x 22 cm
- FD 333 top wipes**
K dostání ve variantách: balení s 50 ubrousky
Velikost ubrousků: 17,5 x 25 cm

■ FD 333 forte premium wipes Dezinfekce s rychlým účinkem, FD 333 forte wipes Dezinfekce s rychlým účinkem

Plně virucidní dezinfekční a čisticí ubrousky připravené k použití na povrchy zdravotnických prostředků a lékařského inventáře



- Baktericidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené viry jako adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry a polioviry)
 - Rychlý dezinfekční účinek
 - Extra velké ubrousky
 - Svěží citrónová vůně
- Účinné látky:** alkoholy, kvartérní amonné sloučeniny

FD 333 forte premium wipes
K dostání ve variantách: dóza s 80 ubrousky
Velikost ubrousku: 14 x 19 cm

FD 333 forte wipes
K dostání ve variantách: kyblík se 100 ubrousky
Velikost ubrousku: 20 x 30 cm

■ FD 350 Dezinfekční ubrousky

Rychle působící dezinfekční a čistící ubrousky s obsahem alkoholu na menší plochy zdravotnických prostředků



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronaviřů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
 - Rychlý dezinfekční účinek
 - Rychlé zaschnutí beze zbytků
 - 3 různé druhy vůně: Classic, Flower, Lemon
- Účinné látky:** alkoholy
K dostání ve variantách: dóza se 110 ubrousky
Velikost utěrky: 14 x 22 cm



■ FD 366 sensitive wipes Dezinfekce citlivých povrchů, FD 366 sensitive top wipes Dezinfekce citlivých povrchů

Dezinfekční a čistící ubrousky připravené k použití na choulostivé povrchy zdravotnických prostředků



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronaviřů a nezapouzdřené noroviry)
 - Rychlý dezinfekční účinek
 - Extra velké ubrousky
 - Neparfémované
- Účinné látky:** alkoholy, kvartérní amonné sloučeniny

FD 366 sensitive wipes

K dostání ve variantách: kyblík se 100 ubrousky
Velikost ubrousku: 20 x 30 cm

FD 366 sensitive top wipes

K dostání ve variantách: zásobník s klipem s 50 ubrousky
Velikost ubrousku: 17,5 x 25 cm

Suché ubrousky

■ FD multi wipes

Univerzální suché ubrousky smočitelné dezinfekčními a čistícími prostředky



- Univerzálně použitelné ubrousky v kombinaci s dezinfekčními roztoky na plochy
- Nepouští vlákna a jsou odolné proti protržení
- Velmi dobrá smáčivost a nedochází k poškrábání povrchů
- Velmi hospodárné

K dostání ve variantách: kyblík s 180 ubrousky

Velikost ubrousku: 20 x 30 cm

Naše doporučení: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive, držák na stěnu pro kyblík FD multi wipes

■ FD multi wipes compact

Univerzální suché ubrousky smočitelné dezinfekčními a čistícími prostředky



- Univerzálně použitelné ubrousky v kombinaci s dezinfekčními prostředky na plochy
- Nepouští vlákna a jsou odolné proti protržení
- Velmi dobrá smáčivost a nedochází k poškrábání povrchů
- Kompaktní krabice, extra velké ubrousky

K dostání ve variantách: kyblík s 60 ubrousky

Velikost ubrousku: 29 x 30 cm

Naše doporučení: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive

■ FD polishing wipe - lešticí utěrka

Utěrka z mikrovláken šetrná k materiálům, se speciálními vlákny na čištění a leštění citlivých povrchů



- Zvlášť důkladné čištění díky tkanině z jemných vláken
- Rychlé leštění beze zbytků
- Odstraňuje drobné nečistoty a prachové částice díky antistatickým vlastnostem
- Lze prát do teploty 60 °C

K dostání ve variantách: jednotlivá utěrka

Velikost utěrky: 32 x 32 cm

Pokožka a ruce



Dezinfekce a čištění Dezinfekce rukou

■ HD 410 Dezinfekce rukou

Alkoholický přípravek pro vtírání do pokožky pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, omezeně virucidní PLUS (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
- Maximálně rychlá: hygienická dezinfekce rukou za 15 sekund/chirurgická dezinfekce rukou za 90 sekund
- Obsahuje promašující látky pečující o pokožku, velmi dobrá snášenlivost:
- Dermatologicky testováno.

Účinné látky: alkohol

K dostání ve variantách: 500 ml, 500 ml pro Hygocare Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l

Naše doporučení: univerzální dávkovač přípravků S 400, L 400, L 1000, bezdotykový dávkovač T/XT 400, T/XT 1000, RX 5M, RX 5T, dávkovací pumpičky

Mytí rukou

■ HD 435 Mycí emulze

Jemná mycí emulze na ruce



- Intenzivně čistící díky vybraným aktivním mycím složkám
- Obsahuje promašující látky pečující o pokožku a složky pro hydrataci pokožky
- Ideální kombinovaný přípravek k dezinfekci rukou s alkoholem HD 410

Obsažené látky: aktivní čistící tenzidy, alantoin

K dostání ve variantách: 500 ml, 1 l, 2,5 l

Naše doporučení: univerzální dávkovač přípravků S 400, L 400, L 1000, bezdotykový dávkovač T 400, T 1000, RX 5M, RX 5T, dávkovací pumpičky, HD 410, HD 440

Péče

■ HD 440 Emulze k ošetření rukou

Neparfemovaná emulze pro ochranu a péči o namáhané a citlivé ruce



- Rychle se vsřebává a nezanechává pocit mastnoty
- Neparfemované
- Bez barviv

Složení výrobku: HD 440 je emulze typu oleje ve vodě (o/v). Obsahuje avokádový olej a glycerin.

K dostání ve variantách: 500 ml

Naše doporučení: univerzální dávkovač přípravků S 400, L 400, bezdotykový dávkovač T/XT 400, dávkovací pumpička



Dávkovací systémy

■ Univerzální bezdotykový dávkovač přípravků XT

Dávkovač na baterie s čidlem k bezdotykovému hygienickému použití přípravků na ruce



- Optimální hygiena rukou díky bezdotykové obsluze
 - Provoz na baterie s indikací stavu baterie akustickým signálem k výměně baterie
 - Vysoký standard hygieny díky krytu z eloxovaného hliníku
 - Autoklávovatelná pumpička z ušlechtilé oceli nebo výměnná pumpička
- Rozměry (ŠxVxH):** XT 1000/XT 400: 9,2 x 33,0 x 21,0 cm
K dostání ve variantách: XT 400 pro 500ml láhev, XT 1000 pro 1l láhev
Naše doporučení: HD 410, HD 435 v 500ml láhvi nebo 1l láhvi, HD 440 v 500ml láhvi, držák misky, stolní stojan, dávkovací sloupek, výměnné pumpičky

■ Univerzální dávkovač přípravků

Univerzální dávkovač přípravků k montáži na stěnu pro aplikaci přípravků na ruce



- Maximálně jednoduché použití
 - K dostání s krátkou (S) nebo dlouhou (L) ruční pákou
 - Provedení z hliníku nebo ušlechtilé oceli s dlouhou životností
 - Pumpička vhodná k dezinfekci v autoklávu nebo výměnná pumpička
- Rozměry (ŠxVxH):** S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, délka ruční páky: S: 16 cm, L: 21,5 cm/L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, délka ruční páky: 22,5 cm
K dostání ve variantách: S 400 a L 400 pro 500 ml láhev, L 1000 pro 1 l láhev
Naše doporučení: HD 410, HD 435 v 500ml láhvi nebo 1l láhvi, HD 440 v 500ml láhvi, výměnné pumpičky

■ Univerzální dávkovač přípravků RX

Manuální nebo bezdotykový univerzální dávkovač přípravků k montáži na stěnu pro aplikaci přípravků na ruce



- Manuální (RX 5M) nebo bezdotykový (RX 5T)
 - Kryt a odkapávací miska z odolného bílého plastu
 - Snadná výměna pumpičky odejmutím zepředu
- Rozměry (ŠxVxH):** 10,2 x 27,0 x 14,2 cm
K dostání ve variantách: RX 5M a RX 5T pro 500ml láhev
Naše doporučení: HD 410, HD 435, HD 440 v 500ml láhvi

i *Dezinfekční prostředky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Speciální oblasti



Dezinfekce a čištění Odsávací zařízení a plivátka

■ Orotol® plus Dezinfekce odsávacího zařízení

Nepěnicí tekutý koncentrát pro současné čištění, dezinfekci, dezodorizaci a údržbu všech odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu



- Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavirů a nezapouzdřené adenoviry a noroviry)
- Rozpouští biofilm a zabraňuje vzniku usazenin z krve a bílkovin
- Roztok pro kontaminovaná odsávací zařízení – poskytuje bezpečnou ochranu proti infekcím
- Prověřená snášenlivost s materiály – doporučeno předními výrobci zařízení

Účinné látky: kvartérní amonné sloučeniny

K dostání ve variantách: 1 l, 2,5 l

Naše doporučení: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ Orotol® ultra Dezinfekce odsávacích zařízení

Práškový koncentrát pro současné čištění, dezinfekci, dezodorizaci a údržbu všech odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, fungicidní, sporicidní (proti Clostridium difficile), virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV a HIV a nezapouzdřené viry jako adenoviry, polyomaviry SV 40, noroviry a polioviry)
- Rozpouští biofilm a zabraňuje vzniku usazenin z krve a bílkovin
- Nízká aplikační koncentrace (1 %)
- Prověřená snášenlivost s materiály – doporučeno předními výrobci zařízení

Účinné látky: uhličitán sodný – peroxohydrát

K dostání ve variantách: 500 g sáček

Naše doporučení: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

■ MD 555 cleaner Speciální čistící prostředek pro odsávací zařízení

Nepěnicí čistící koncentrát pro všechny druhy odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu



- Rozpouští ztvrdlé nánosy vápence, profylaktických prášků nebo profylaktických perlových produktů
- Vynikající intenzivní čistící účinek při usazeninách a ucpaní sání
- Prověřená snášenlivost s materiály – doporučeno předními výrobci zařízení
- Ideální v kombinaci s Orotol® plus

Obsažené látky: organické a anorganické kyseliny, nepěnicí tenzidy

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: OroCup, Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 550

■ MD 550 Čistící prostředek pro plivátka

Nepěnicí roztok připravený k použití pro intenzivní čištění plivátek bez zanechání zbytků



- Bezproblémové odstranění zbytků, jako jsou vápenaté usazeniny, krev nebo detektory plaku
- Současné čištění, dezodorizace a údržba plivátek
- Bez abrazivních složek – nedochází k poškrábání plivátka
- Antimikrobiální – účinný proti bakteriím, TB bakteriím a kvasinkám

Účinné látky: alkoholy

K dostání ve variantách: 750 ml

Naše doporučení: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner

■ Ošetřovací systém OroCup

Uzavřený systém péče k dezinfekci a čištění odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu komfortní pro uživatele



- Vytváří směs vzduchu a vody pro optimální smočení a účinné čištění odsávacího systému
- Promyšlený systém k nasazení a prosávání roztoků připravených k použití
- Adaptér pro připojení všech odsávacích hadic

K dostání ve variantách: 2litrová nádoba

Naše doporučení: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner



Otisky a dentální technické práce

■ MD 530 Čistící prostředek na odstraňování cementu a čištění zubních protéz

Roztok připravený k použití pro odstraňování cementu, zubního kamene, kuřáckých skvrn, oxidovaných vrstev atd. z protéz, můstků, korunek, ze špachtlí, skla apod.



- Intenzivní čistící účinek a odstranění povlaků rozpustných v kyselině beze zbytků
- K přímému použití s vynikající snášenlivostí s materiály
- Zvlášť rychlý a účinný díky speciální receptuře
- Obsahuje inhibitory koroze
- Vhodný pro použití v ultrazvukové lázni

Obsažené látky: anorganické kyseliny, tenzidy

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: Hygobox, Hygosonic

■ MD 535 Prostředek na odstraňování sádry

Roztok připravený k použití pro odstraňování sádry a alginátů z otiskových lžic a ostatních pomůcek



- Neutrální speciální čistící prostředek se zvlášť rychlým účinkem
- Vynikající čistící účinek pro odstranění sádry a alginátu beze zbytků
- S indikátorem aktivity
- Vhodný pro použití v ultrazvukové lázni

Obsažené látky: alkalické čistící složky a komplexotvorná činidla

K dostání ve variantách: 2,5 l

Naše doporučení: Hygobox, Hygosonic

■ MD 520 Dezinfekce na otisky

Plně virucidní roztok určený pro čištění a dezinfekci otisků a protetických prací



- Baktericidní, tuberkulocidní, levurocidní, virucidní (zapouzdřené viry včetně HBV, HCV, HIV a koronavírů a nezapouzdřené viry jako adenoviry, polyomaviry SV40, noroviry a polioviry)
- Použití pro algináty, silikony, polyéterovou pryž, hydrokoloidy, polysulfidy atd.
- Zvýšená přesnost základního modelu ze sádry díky účinnému čistícímu účinku
- Žádné narušení stability rozměrů nebo kompatibility sádry

Účinné látky: kvartérní amonné sloučeniny, glutardialdehyd

K dostání ve variantách: 2,5 l, 10 l

Naše doporučení: Dezinfekční dóza, Hygobox, Hygojet

■ MD 520 Dezinfekční dóza

Dóza pro čištění a dezinfekci otisků v dezinfekčním roztoku MD 520



- Ve víku se nachází speciální závěs na maximálně 2 otiskové lžice
- Snadná vizuální kontrola, že jsou otisky uvnitř dózy

Rozměry: výška 19 cm, Ø: 11,7 cm

Objem: maximálně 1 l

Jednotka

■ Hygojet

Dezinfekční a čistící komora pro otisky a protetické práce



- Uzavřený systém brání křížovým infekcím
- Úsporný při použití – s pouhými 10 ml MD 520 na otisk
- Maximálně účinná – při 6 otiscích během 12 minut
- Ověřená dezinfekční metoda – doložená znaleckým posudkem

Rozměry (ŠxVxH): 56 x 34 x 32 cm

Naše doporučení: MD 520

Spektra účinků a použití

	Dezinfekce	Čištění	Na seznamu VAH	Na seznamu dezinfekčních prostředků IHO	Testováno dle norem EU	Baktericidní	Tuberkulocidní	Levurocidní	Fungicidní	Omezeně virucidní	Omezeně virucidní PLUS	Virucidní	Koncentrace / doba působení v min	Účinnost ve dnech
Nástroje														
ID 212 Dezinfekce nástrojů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			2%/5 ⁴	7
ID 212 forte Dezinfekce nástrojů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			2%/5 ⁴	7
ID 213 Dezinfekce nástrojů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			2%/5 ⁴	14
ID 215 Enzymatický čistič nástrojů	■				■	■		■		■			1%/2%/30/15	
ID 220 Dezinfekce rotačních nástrojů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	100%/1 ⁴	7
Plochy														
FD 300 Dezinfekce ploch	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	1%/2%/15/5 ⁴	
FD 312 Dezinfekce ploch ¹	■	■	■	■	■	■		■		■	■		1%/15 ⁴	
FD 322 Dezinfekce s rychlým účinkem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100%/1 ⁴	
FD 333 Rychlá dezinfekce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100%/1 ⁴	
FD 333 forte Dezinfekce s rychlým účinkem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		100%/1 ⁴	
FD 366 sensitive Dezinfekce citlivých povrchů	■	■	■	■	■	■	■	■		■			100%/1 ⁴	
FD 300 top wipes Dezinfekce ploch	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	připraveno k použití/2 ⁴	
FD 312 wet wipes Dezinfekce ploch ¹	■	■	■	■	■	■		■		■			připraveno k použití/15 ⁴	
FD 322 premium wipes Dezinfekce s rychlým účinkem FD 322 top wipes Dezinfekce s rychlým účinkem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		připraveno k použití/1 ⁴	
FD 333 wipes Dezinfekce s rychlým účinkem FD 333 top wipes Dezinfekce s rychlým účinkem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		připraveno k použití/1 ⁴	
FD 333 forte premium wipes Dezinfekce s rychlým účinkem FD 333 forte wipes Dezinfekce s rychlým účinkem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	připraveno k použití/1 ⁴	
FD 360 Čištění a péče o umělou kůži		■											připraveno k použití	
FD 350 Dezinfekční ubrousky	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		připraveno k použití/1 ⁴	
FD 366 sensitive wipes Dezinfekce citlivých povrchů	■	■	■	■	■	■	■	■		■			připraveno k použití/1 ⁴	
FD 366 sensitive top wipes Dezinfekce citlivých povrchů	■	■	■	■	■	■	■	■		■			připraveno k použití/1 ⁴	
Pokožka a ruce														
HD 410 Dezinfekce rukou ^{1,2}	■		■	■	■	■	■	■		■	■		100%/0,25/1,5 ^{2,4}	
HD 435 Mycí emulze ⁴		■											100%	
HD 440 Emulze k ošetření rukou													100%	
Speciální oblasti														
Oroto [®] plus Dezinfekce odsávacího zařízení	■	■	■	■	■	■		■		■			2%/5 ⁴	
Oroto [®] ultra Dezinfekce odsávacích zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	1%/5 ⁴	
MD 555 cleaner Speciální čisticí prostředek pro odsávací zařízení		■											5% / 30-120	
MD 550 Čisticí prostředek pro plivátka		■		■	■	■		■					100% ⁴	
MD 520 Dezinfekce otisků	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	100%/5 ^{3,4}	7
MD 530 Prostředek na odstraňování cementu / prostředek na čištění zubních protéz		■											100% ³	
MD 535 Prostředek na odstraňování sádry		■											100%	

¹Dezinfekční prostředky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. ²Hygienická/chirurgická dezinfekce rukou. ³V přístroji Hygojet. ⁴Baktericidní/levurocidní.

⁴Pro podrobné informace o výrobcích navštivte prosím webové stránky www.duerrdental.com