

*initial*™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Skvělá volba pro nejvyšší standardy.



## Skvělá volba pro nejvyšší standardy

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, navržený tak, aby poskytoval dokonalou rovnováhu vysoké pevnosti a výjimečné estetiky, je ideální volbou pro přední i zadní náhrady.



### LEPŠÍ ESTETIKA

Přirozený odstín a přechod translucence pro přední a zadní náhrady.



### VYSOKÁ PEVNOST

Klasifikováno jako třída V podle DIN EN ISO 6871 se střední hodnotou > 1.100 MPa.




### VŠESTRANNÝ

Všestranné a vhodné pro širokou škálu klinických indikací. Rychlé slintování nebo standardní dlouhodobá sintrace.


## Přirozený přechod barev

Esteticky přirozený: plynulý přechod od krčku k incizi, v ideální barvě se skvělou translucencí, je ten nejlepší možný způsob napodobující přirozenou strukturu zubu.

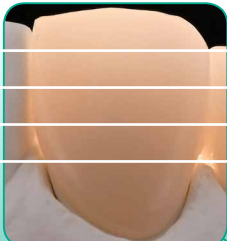Translucence >49% Pevnost 800 MPa		5Y   INCIZE	20%
		4-5Y   VNITŘNÍ VRSTVA 1	15%
		4-5Y   VNITŘNÍ VRSTVA 2	15%
		4-5Y   VNITŘNÍ VRSTVA 3	15%
Translucence >45% Pevnost 1.150 MPa		4Y   KRČEK	35%

## Fyzikální vlastnosti

- Oxid zirkoničitý Typ II Třída V DIN EN ISO 6871
- Pevnost v ohybu: střední hodnoty  $\geq 1.100$  MPa
- Vysoká úroveň přechodu translucence od >45% to >49%
- Rychlá sintrace pro korunky a můstky do 3 členů

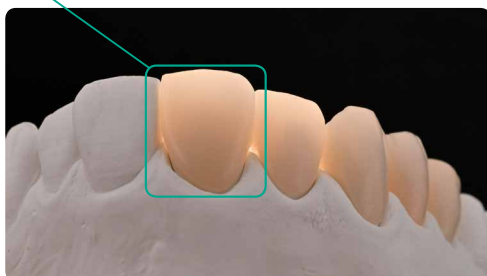


## Vyrobena pro kvalitativní produktivitu

Díky intuitivnímu pracovnímu postupu GC lze maximalizovat produktivitu kvality bez kompromisů,

### SKENOVÁNÍ & NÁVRH s Aadvia Lab Scan 3

Skener ovládaný gesty s vysoce přesnými a inteligentními funkcemi skenování.

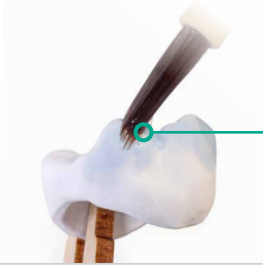

### 2D VNITŘNÍ DOBARVENÍ s Zirconia Coloring Liquid

Dodejte efektní barvy pro maximální sofistikovanost.

### MIKROVRSTVENÍ s Initial IQ ONE SQIN

#### 3D BARVENÍ s Initial IQ Lustre Pastes ONE

Dobarvení s fluorescencí - buď pro čistě monolitickou práci nebo mikro-cutback v kombinaci s s IQ SQIN.



### TVAR & TEXTURA s Initial IQ SQIN

Vitalita, přirozená textura a lesk v mikrovrstvě.



NEBO

### KLASICKÉ FAZETOVÁNÍ s Initial Zr-FS

Nepřekonatelné optické efekty a vysoká stabilita po i po několika pálení konstrukce s klasickou cut-back technikou.



### FIXACE s FujiCEM Evolve

Preferovaná volba pro zirkony, snadné použití, ideální pro juxtagingivální nebo subgingivální okraje.



# initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Skvělá volba pro nejvyšší standardy.

## Výhody na první pohled

- Vynikající estetika, kombinace s barevného odstínu a přechodem transparence.
- **Vysoká pevnost** ve všech vrstvách, díky čemuž je vhodná pro širokou škálu indikací.
- Vytvořte požadovanou povrchovou úpravu konstrukce ve správném barevném tónu.
- **Optimální souhra** s Initial Zirconia Coloring Liquid a konceptem IQ ONE SQIN pro špičkovou individualizaci.
- Všechny 16 odstínů V-shades a 3 typy vybělených jsou k dispozici v diskách o síle 14, 16, 20 a 25 mm s průměrem 98,5 mm.



## Skvělá souhra



Initial Zirconia Coloring Liquid



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax. +32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic  
V Olšínách 82  
CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965  
Fax. +420.274.771.965  
info.czech@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/cs-CZ>