

VOCO Perfect Protect®

DESENZIBILIZAČNÍ GEL PRO POUŽITÍ PŘI BĚLENÍ ZUBŮ

Rozšíření rodiny Perfect Bleach

Mnoho lidí by si přálo bělejší zuby bez diskolorací, které mohou vznikat například pitím kávy nebo kouřením. Společnost VOCO již řadu let nabízí osvědčené a velmi kvalitní produkty řady Perfect Bleach pro bělení zubů. Obzvláště oblíbené jsou metody domácího bělení, které lze optimálně začlenit do každodenního života uživatelů. Co se však stane, když začnou být zuby v důsledku domácího bělení hypersenzitivní?

Perfektní doplněk k domácímu bělení

VOCO Perfect Protect je desenzibilizační gel pro domácí použití, který je přizpůsoben podmínkám domácího bělení. Obsahuje 3 % dusičnanu draselného (Δ 11 600 ppm draslíku) a 0,11 % fluoridu (Δ 1 130 ppm fluoridu), čímž spolehlivě přispívá k desenzibilizaci citlivých zubů. Zatímco dusičnan draselný pomáhá v úlevě od bolesti u hypersenzitivních zubů, fluorid podporuje uzavření otevřených dentinových kanálků a řeší tak příčinu hypersenzitivity.

Průhledný materiál bez příchuti se používá velmi jednoduše a intuitivně: aplikuje se po dobu 15–60 minut pomocí stejného nosiče, jaký se používá při domácím bělení a lze jej aplikovat před i po bělení zubů.

Všestrannost:

VOCO Perfect Protect je kompatibilní se všemi domácími bělicími materiály dostupnými na trhu – to znamená, že nemusíte být uživatelem Perfect Bleach, abyste mohli využívat všech výhod VOCO Perfect Protect!

Obvyklá vysoká účinnost:

VOCO Perfect Protect opět potvrzuje obvyklou skvělou účinnost a výko produktů VOCO. Měření Dr. Dimitriose Dionysopoula z Oddělení chirurgického zubního lékařství na Aristotelově univerzitě v Soluni (Řecko) ukázala, že VOCO Perfect Protect si v testech uzavírání otevřených dentinových kanálků vedl nejlépe ze všech desenzibilizačních produktů určených pro použití u pacientů. To znamená, že produkt VOCO Perfect Protect s přibližně 80 % uzavřených dentinových kanálků (po použití) je proti hypersenzitivitě způsobené domácím bělením nejúčinnější (zdroj: graf vpravo).

Indikace

Utěsnění obnaženého dentinu


Výhody

- Spolehlivá desenzibilizace
- Krátká a flexibilní doba aplikace
- Neutrální příchut'
- Příjemná konzistence
- Snadné naplnění nosiče

Obsah balení

REF 1019 Stříkačka 2 x 2 ml

Množství uzavřených dentinových kanálků

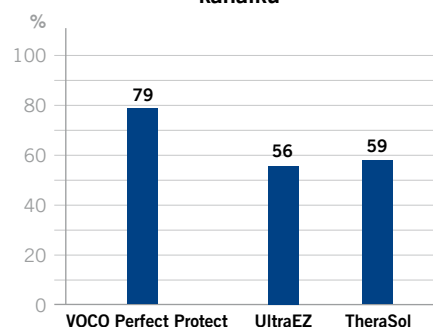

Zdroj: Dr. Dimitriose Dionysopoula, Oddělení chirurgického zubního lékařství, Aristotelova univerzita v Soluni / Řecko

Použití



Vyčistěte zuby a naplňte nosič materiálem



Nasadte nosič a odstraňte přebytek materiálu



Nosič mějte v ústech 15–60 minut



Vyčistěte nosič a zuby

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Německo

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140
info@voco.com
www.voco.dental

